

# Soprano*ice* PLATINUM

## EL PODER DE TRES

EDICIÓN LIMITADA

NUEVA TECNOLOGÍA DE DIODO TRÍO  
PARA DEPILACIÓN LÁSER

3 longitudes de onda en un aplicador

- Eficacia clínicamente probada
- Prácticamente indoloro
- Para todo tipo de pieles, incluso bronceadas

**Alma**  
Lasers™  
MÉDICA


Como solución integrada, **Soprano ICE Platinum combina los beneficios de 3 longitudes de onda, logrando resultados excelentes incomparables a los de cualquier láser de longitud de onda simple.**

**Alma Lasers, coincidiendo con la celebración de sus 10 años de éxito y el galardón otorgado a Soprano ICE, se enorgullece de presentar Soprano ICE Platinum y la nueva tecnología de diodo TRÍO.**

La edición Platinum combina 3 longitudes de onda láser en una innovadora pieza de mano independiente, que se focalizan simultáneamente en diferentes profundidades y estructuras anatómicas del folículo piloso. Al combinar diferentes niveles de penetración y absorción de las tres longitudes de onda, junto con la cobertura del tratamiento, la comodidad y la baja necesidad de mantenimiento del láser de diodo, Soprano ICE Platinum logra el tratamiento de depilación láser más seguro, eficaz e integral disponible hoy en día.

## TECNOLOGÍA DE DIODO TRÍO

Soprano ICE Platinum ofrece los beneficios sinérgicos de las 3 longitudes de onda más eficaces para depilación. Cada una de ellas se centra en estructuras diferentes dentro del folículo piloso. Los 3 objetivos anatómicos principales incluyen la protuberancia, el bulbo y la papila folicular.

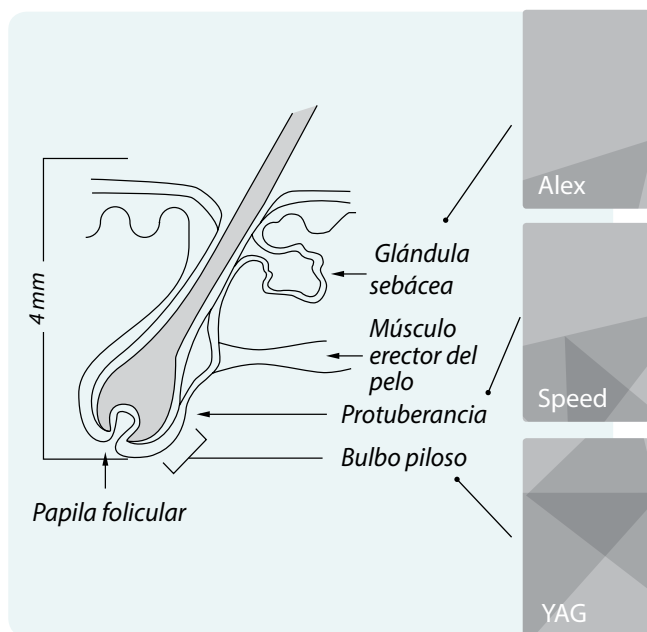

**Eficacia superior a cualquier nivel de profundidad al trabajar conjuntamente con 3 longitudes de onda láser diferentes.**

## ALEX 755NM

La longitud de onda del láser de Alejandrita ofrece una absorción de energía más potente por el cromóforo melanina. Esto lo hace ideal para un rango más amplio de tipos de pelo y color, en especial el pelo claro y fino. Gracias a una penetración más superficial, la longitud de onda de 755nm se centra en la protuberancia del folículo piloso y es especialmente eficaz en el pelo más superficial.

## SPEED 810NM

La longitud de onda de 810nm, la clásica para depilación láser, ofrece una penetración profunda en el folículo piloso con una potencia media elevada, una alta tasa de repetición y un gran tamaño de spot de 2cm para un tratamiento más rápido. La longitud de onda de 810nm tiene un nivel moderado de absorción de melanina y una capacidad de penetración que se centra en la protuberancia y el bulbo del folículo piloso, siendo altamente segura para los fototipos más oscuros de piel.

## YAG 1064NM

La longitud de onda YAG 1064 se caracteriza por una menor absorción de melanina, siendo una solución específica para los fototipos de piel más oscuros. Al mismo tiempo, la longitud de onda de 1064nm ofrece la mayor penetración del folículo piloso, permitiendo centrarse en el bulbo y la papila. Dado que una mayor absorción de agua genera una temperatura más elevada, la incorporación de la longitud de onda de 1064nm aumenta el perfil térmico de todo el tratamiento con láser para una depilación más eficaz.

# MÚLTIPLES MODOS: SHR™, SHR™ Stack y HR

Soprano ICE Platinum ofrece múltiples métodos de tratamiento: In-Motion™, SHR Stack y estático para satisfacer las diferentes necesidades de su especialidad profesional



## SHR™ DE ALMA LASERS


SHR es el método de depilación patentado por Alma Lasers, globalmente reconocido y el más utilizado por clínicas de todo el mundo en los últimos 10 años.

### Acumulación de calor

SHR trabaja calentando gradualmente la dermis hasta alcanzar la temperatura necesaria para dañar eficazmente los folículos pilosos y prevenir el nuevo crecimiento del pelo, mientras evita provocar lesiones en el tejido circundante.

SHR alcanza la temperatura terapéutica necesaria emitiendo pulsos cortos de energía con una tasa de repetición alta que alcanzan unas altas energías medias 100% eficaces. Así, la melanina no supone una barrera para la eficacia del tratamiento de depilación. Además, el tratamiento resulta virtualmente indoloro para el paciente.

La técnica de aplicación en movimiento, In-Motion™, que consiste en mover el aplicador de forma repetida sobre el área de tratamiento, garantiza una cobertura total al tiempo que la tecnología ICE™ enfría la superficie de la piel, evitando quemaduras superficiales y permitiendo una depilación prácticamente sin dolor y altamente eficaz.

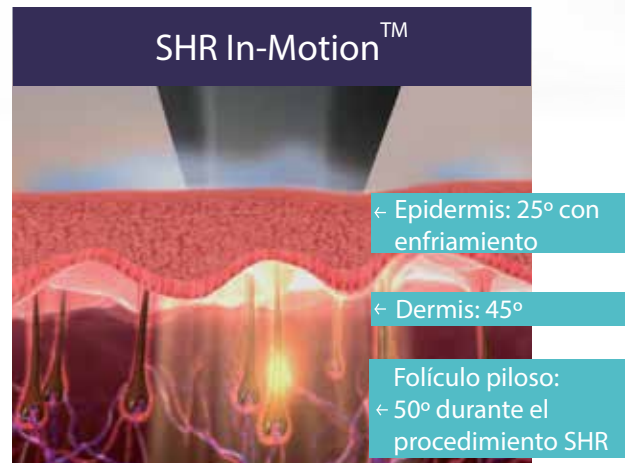

La tecnología SHR ha sido objeto de numerosos estudios clínicos, artículos revisados y otros estudios profesionales. En los estudios comparativos entre SHR y otras tecnologías de depilación láser, se constató que SHR causa mucho menos dolor, es más eficaz y no provoca efectos secundarios en pacientes con la piel oscura.

“ Creo que Soprano SHR es la primera innovación en depilación láser en los últimos 10 años. Ahora podemos tratar todo tipo de pieles de forma segura, con menos dolor y sin poner en riesgo la eficacia del tratamiento. ”

Dr. Martin Braun, Vancouver Laser Center,  
Vancouver BC, Canadá

# Soprano ICE Platinum, el equipo más completo del mercado para una depilación láser superior

## Soprano ICE Platinum



Potencia media de 200 w.  
Eficacia garantizada



## Otros equipos




Menos de 100 w.




Reduce un 50% el tiempo de tratamiento



Tratamiento más largo y menos rentable

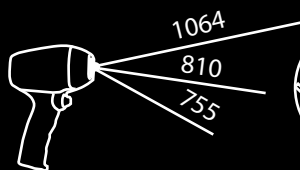

3 longitudes de onda combinadas

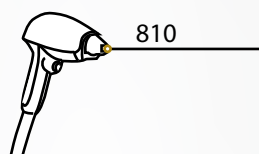

1 única longitud de onda



Seguridad clínicamente probada



Sin estudios clínicos que la garanticen



Virtualmente indoloro.  
Cómodo para el paciente



Con dolor.  
Sesiones bastante molestas



Modo de trabajo dual:  
SHR y HR



Solo HR



Todo tipo de pieles,  
incluso bronceadas



Solo aptos para  
un tipo de piel

EL PODER  
DE TRES



“ El revolucionario aplicador Soprano Platinum TRÍO ofrece una cobertura y niveles de eficacia nunca antes alcanzados. Además, sus tres longitudes de onda que funcionan de forma simultánea son un aspecto innovador para el sector de la depilación láser. ”

Dr. Uwe Paasch, Clínica  
Universitaria de Leipzig, Alemania



Sopranoice  
PLATINUM



## Beneficios del sistema



10 años de tecnología SHR  
clínicamente probada

Aprobada por la FDA para los fototipos  
de piel I-VI y pieles bronceadas

Pantalla táctil de gran tamaño,  
a color e intuitiva

Fácil de utilizar

Sin consumibles

Tamaño de cuadrícula ajustable

Potente enfriamiento



INNOVADOR  
APLICADOR  
3 EN 1




EFICAZ EN TODO TIPO  
DE PIELS, INCLUSO  
BRONCEADAS



10 AÑOS DE EFICACIA  
CLÍNICAMENTE  
PROBADA



BAJO MANTENIMIENTO

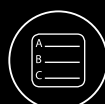

SENCILLO  
FUNCIONAMIENTO

### Alma Lasers Médica

C/ Jose María Alonso  
nº 36 29018 Málaga  
Tel: (+ 34) 952 207 651 -  
902 109 001  
Fax: (+ 34) 952 206 214  
info@almalasersmedica.es

©2016 Alma Lasers Inc. Todos los derechos reservados.  
Alma, Alma Lasers, Soprano, ICE, In - Motion, SHR, Speed, Alma Lasers  
Médica y sus logos, son marcas registradas por Alma Lasers Inc y/o  
Alma Lasers Médica en Estados Unidos y otros países.

[www.almalasersmedica.es](http://www.almalasersmedica.es)  
[www.almalasers.es](http://www.almalasers.es)

**Alma**  
Lasers™  
MÉDICA

Conecta con Alma Lasers Médica

